


Massagematte Premium

Art.-Nr. 138210711

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

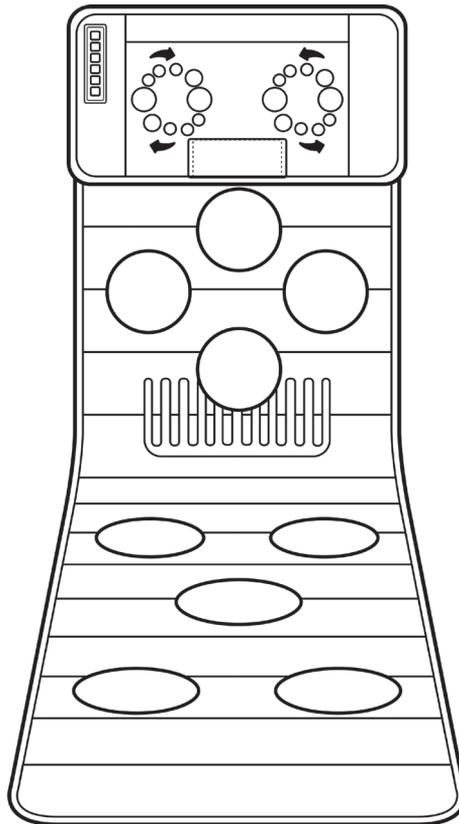


Inbetriebnahme


Verbinden Sie den DC-Anschluss der Massagematte mit dem Gleichstromanschluss des Netzadapters. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts, dann leuchtet die Kontrollleuchte an der Fernbedienung. Das Gerät ist betriebsbereit.

Bedientasten an der Massagematte

1. Drücken Sie Taste , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet im Automatik-Modus. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste ein zweites Mal. Im Automatik-Modus verfügt das Gerät über folgende Funktionen: Heizfunktion, zusammen mit Knet- und Massagefunktion (1 Minute lang Vorwärtsrotation, dann 1 Minute lang Rückwärtsrotation und abwechselnd so weiter. Nach 15 Minuten Programmende).
2. Nach dem Einschalten startet das Gerät eine Minute lang im Automatik Modus. Drücken Sie Taste  einmal, um die Vorwärtsrotation einzuschalten. Drücken Sie die Taste nochmals, um zur Rückwärtsrotation zu wechseln.
3. Die Massagematte verfügt über 3 Intensitätsstufen. Drücken Sie Taste  einmal, um die Massage auf niedriger Intensität durchzuführen. Drücken Sie die Taste nochmals, um zur intensiven Massage zu wechseln. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um wieder zur mittleren Intensitätsstufe zurückzukehren.
4. In der Grundeinstellung schaltet die Massagematte die Heizfunktion ein. Drücken Sie Taste  einmal, um die Heizfunktion auszuschalten. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Heizfunktion wieder einzuschalten.
5. Drücken Sie Taste , um den Energiesparmodus zu aktivieren.
6. Schalten Sie die Massagematte ein. Danach können sie durch mehrmaliges Drücken von Taste  zwischen drei intelligenten Massagemodi wechseln.

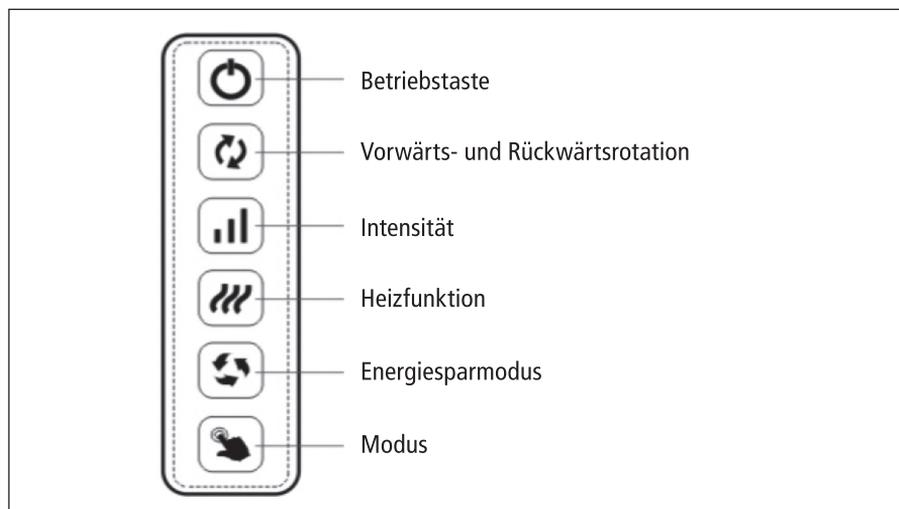

Fernbedienung

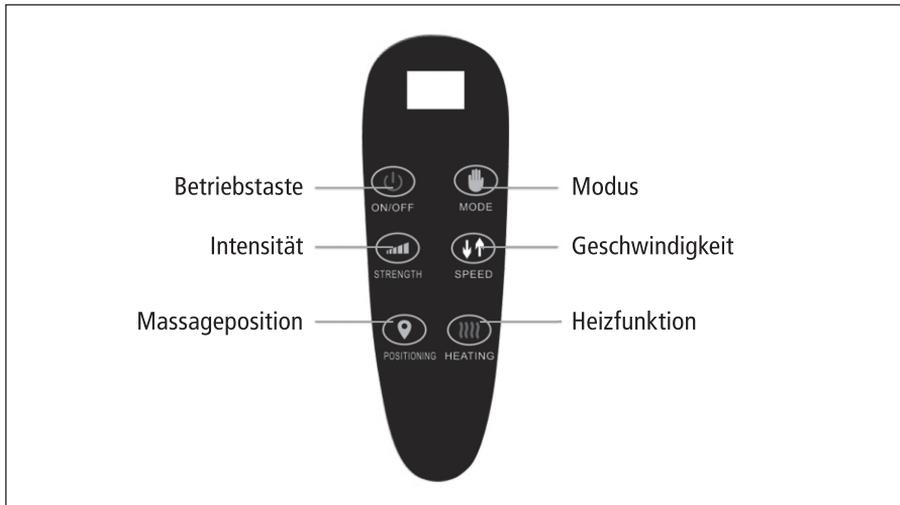

- **Betriebstaste/Timer:** Drücken Sie die Taste einmal, um die Massagematte einzuschalten. Drücken Sie ein weiteres Mal, um den Timer auf 10 Minuten einzustellen. Drücken Sie ein drittes Mal, um den Timer auf 20 Minuten einzustellen. Drücken Sie ein viertes Mal, um den Timer auf 30 Minuten einzustellen.
- **Modus:** Mit dieser Taste können Sie einen Massagemodus auswählen. Sie haben die Wahl zwischen Modus 1 bis 9.
- **Intensität:** Wählen Sie mit dieser Taste eine für Sie angenehme Massage-Intensität. Sie haben die Wahl zwischen Intensität 1 bis 9.
- **Geschwindigkeit:** Wählen Sie mit dieser Taste eine für Sie passende Massage-Geschwindigkeit. Sie haben die Wahl zwischen Geschwindigkeitsstufe 1 bis 9.
- **Massageposition:** Durch Drücken dieser Taste können Sie die Position der Massage verändern. Sie haben 9 Positionen zur Auswahl.
- **Heizfunktion:** Mit dieser Taste können Sie die Heizfunktion ein- und ausschalten. Die Massagematte bietet Ihnen 3 Heizstufen.

Hinweis: Sie können den Halsmassageteil separat mit einem Netzadapter betreiben.

Betriebsumgebung

- Bitte gebrauchen Sie dieses Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung (wie z.B. in einem Badezimmer) oder in der Nähe von Wasserquellen, um Fehlfunktionen und Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Raumtemperaturen, die höher sind als 40°C, oder in der Nähe von Hitzequellen wie z.B. elektrischen Heizkörpern oder Küchenherden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Raumtemperaturen unter 5 °C, da die Eindickung des Schmieröls den Verschleiß von Maschinenzahnrädern und Lagerübertragungsteilen erhöhen und die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in staubiger Umgebung und meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn das Produkt zur Verwendung von einem Lagerort mit niedriger Temperatur in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich in den inneren Metallteilen Wasserdampf ansammeln, der den normalen Betrieb des Produkts beeinträchtigen oder sogar das Gerät beschädigen kann. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Inbetriebnahme eine Stunde lang bei normaler Raumtemperatur zu lagern.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen und verstehen Sie sämtliche Anweisungen in dieser Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts, um die Sicherheit und korrekte Benutzung zu gewährleisten.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen und müssen beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe dieses Produkts aufhalten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Herausziehen den Stecker ziehen, nicht das Kabel. Hängen Sie das Produkt nicht am Netzkabel auf. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Falls der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sein sollten, bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Bedienfeld darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt geraten. Berühren Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen oder Füßen.

- Wenn die Oberfläche des Produkts beschädigt ist (z. B. der Stoffbezug oder das Leder am Oberflächenmassagekopf), stellen Sie die Verwendung sofort ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände durch die Öffnungen ins Geräteinnere gelangen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte schalten sie zuerst sämtliche Bedienregler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen möchten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Im Geräteinneren besteht Hochspannung. Benutzer dürfen das Gerät nicht selbst reparieren, es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
- Falls das Gerät Fehlfunktionen aufweist, schalten Sie es bitte sofort aus. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.

Dieses Gerät ist für folgende Personen nicht geeignet

Bitte konsultieren Sie in folgenden Fällen Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen:

- Implantation von Herzschrittmachern oder ähnlichen implantierbaren medizinischen Geräten
- Patienten mit akuten Erkrankungen wie Herzerkrankungen
- Wenn Sie an einer Belastungs-Rücken-Krankheit mit schwachen oder beschädigten Knochen, insbesondere der Wirbelsäule leiden
- Nach einer Operation
- Während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt
- Wenn Sie an Krebs oder Osteoporose leiden
- Wenn Sie Probleme mit der Blutzirkulation oder Thromboseembolien haben
- Wenn Sie an Hautinfektionen leiden
- Bei abnormalen Phänomenen in den Gliedmaßen
- Unfall oder Verletzung der Wirbelsäule
- Kinder
- Bei körperlichen Beschwerden nach der Operation
- Wenn Sie sich schwach, schwindlig oder kränklich fühlen
- Die Oberfläche des Produkts ist heiß und sollte nicht von Personen verwendet werden, die hitzeempfindlich sind.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Fehler im Stromnetz oder am Netzadapter.	Mit einem anderen Elektrogerät prüfen, ob Strom an der Steckdose anliegt.
Betriebsanzeige leuchtet nicht.	Netzstecker korrekt eingesteckt?	Netzstecker vollständig und sicher einstecken.
	Gerät eingeschaltet?	Zum Einschalten Betriebstaste drücken.
Massage- und Rollfunktion langsam und schwach. Lautes Betriebsgeräusch.	Stromausfall.	Stromnetz prüfen.
	Gerätetemperatur zu hoch, automatischer Überhitzungsschutz ausgelöst.	Gerät vollständig abkühlen lassen und dann neu starten.
Lautes Betriebsgeräusch.	Zu langer Dauerbetrieb.	Nach 10 Stunden Betrieb nimmt die Geräuschentwicklung zu.

Technische Daten

- Modell: ES-M22-1
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Nennleistung: 24 W
- Exekutivstandards (British): GB4706.1-2005
GB4706.10-2008

Hinweis: Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einem Netzadapter geeignet. Wenn der Adapter beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das entsprechende Teile-Wartungszentrum oder eine qualifizierte Fachwerkstatt, um den Adapter durch einen vom Hersteller empfohlenen Original-Adapter zu ersetzen.





Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

