


BADHOCKER

Art.-Nr. 6024005

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

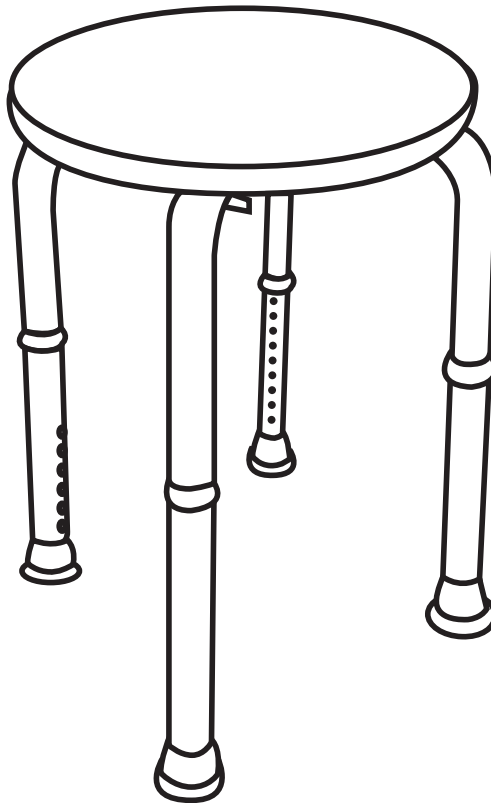

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180/6 35 43 60 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)


Vor der Erstinbetriebnahme

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt vor der Erstinbetriebnahme auf Vollständigkeit und Transportschäden.


Lieferumfang

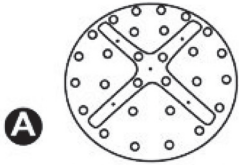


1 x Sitzplatte

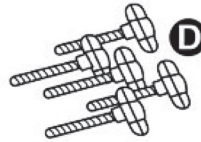


5 x Flügelschrauben

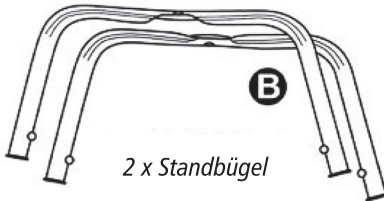

2 x Standbügel

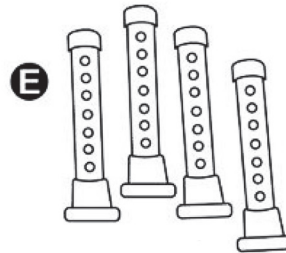


4 x Teleskopbeine

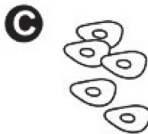

5 x Metall-Beilagscheiben


Montageanleitung

1. Legen Sie die Sitzplatte (A) mit der Oberseite nach unten gerichtet auf eine flache Unterlage. Drehen Sie einen Standbügel (B) ebenfalls auf den Kopf und richten Sie die Schraublöcher an den Löchern der Sitzplatte (A) aus.
2. Drehen Sie den zweiten Standbügel (B) ebenfalls auf den Kopf und setzen ihn auf die gleiche Weise auf den Sitz, so dass er quer zum ersten Bügel auf der Sitzplatte (A) aufliegt und die Schraublöcher wieder übereinander ausgerichtet sind.
3. Legen Sie die Beilagscheiben (C) auf die Schraublöcher. Stecken Sie je eine Flügelschraube (D) durch jedes Schraubloch der Bügel und schrauben sie in der Sitzplatte (A) ein. Drehen Sie dann die Flügelschrauben sicher fest. Bitte die Schrauben nicht überdrehen!
4. Stecken Sie zum Schluss die Teleskopbeine (E) auf die Standbügel. Stellen Sie sicher, dass jedes Teleskopbein sicher in der Verriegelung einrastet (Feststellknopf schnellt heraus). Stellen Sie alle vier Teleskopbeine auf die gleiche Höhe ein.
5. Stellen Sie den Badhocker in die Dusche, nachdem Sie ihn korrekt zusammengesetzt und umgedreht haben.

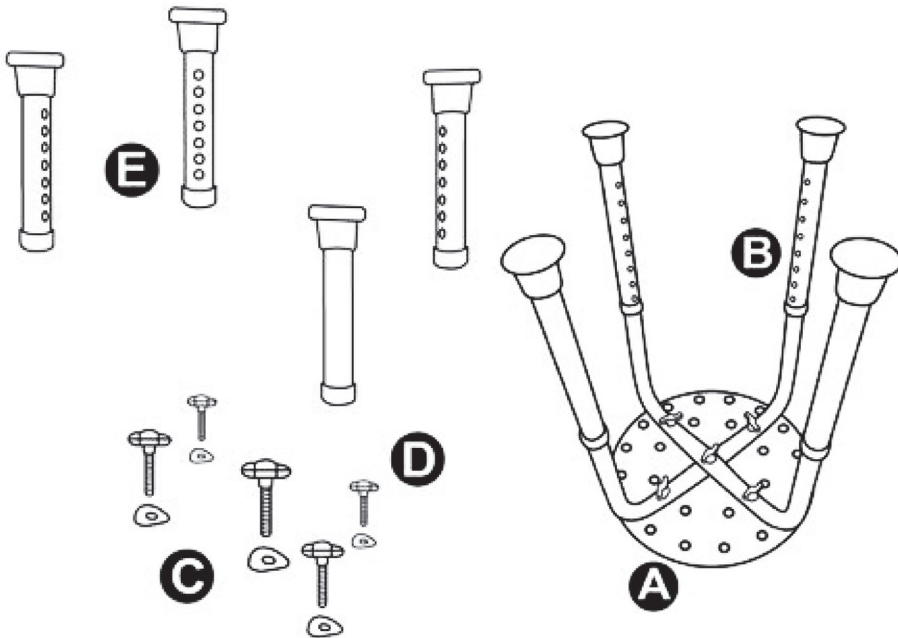

! Sicherheitshinweise !

- Dieser Hocker wurde ausschließlich für die Verwendung im Badezimmer konzipiert. Verwenden Sie den Hocker nicht zweckentfremdet.
- Ziehen Sie sämtliche Schrauben von Hand fest. Versuchen Sie nicht, die Schrauben zu fest anzudrehen oder zu überdrehen, um die Sicherheit und Standfestigkeit des Hockers nicht zu beeinträchtigen.
- Alle vier Teleskopbeine müssen unbedingt auf die gleiche Höhe eingestellt werden.
- Stellen Sie den Badhocker auf eine flache und ebene Unterlage.
- Dieser Hocker ist ausschließlich zum Sitzen konzipiert. Stellen Sie sich niemals auf den Badhocker.
- Achtung: Zulässige Sitzlast maximal **120 kg**

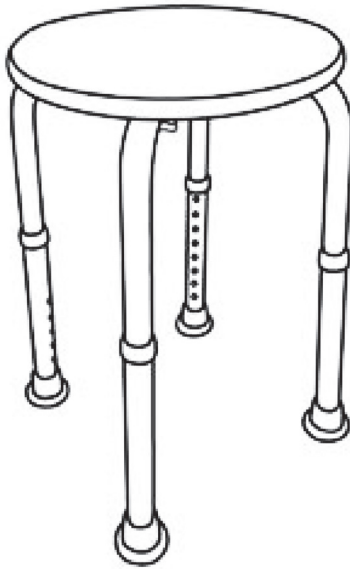

Badhocker fertig montiert

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180/6 35 43 60 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)